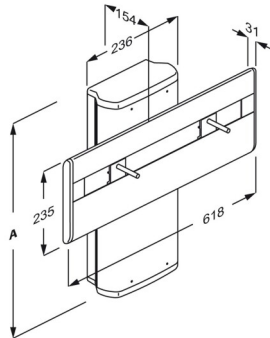




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart R4751
	VVS:654003120 NRF:6132535 RSK:7972593 EAN:5708590309316 HMI: 71760 NBS:N13:30,335
	
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng, vægmonteret. Elektrisk højderegulérbart 300 mm med håndbetjening. Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE/NEW CURVE håndvaske). Materialer: Aluminium og ABS polymer. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal belastning: 100 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 100 kg, belastes hver vægmonteringskruer med 42 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 100 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 104 kg støtter sig til vasken.</b></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 23 mm/s
<b>Støjniveau</b>	45 dB



<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R4751
<b>Materialer</b>	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeaafdækningerne er fremstillet i ABS.
<b>Ergonomi</b>	Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af håndbetjeningen. Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
<b>Funktioner</b>	Håndbetjeningen leveres med vægbeslag.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
<b>Styreboks</b>	SMPS14002
<b>Håndbetjening</b>	HB3 (Linak) IPX6
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



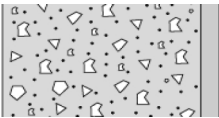
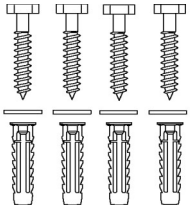

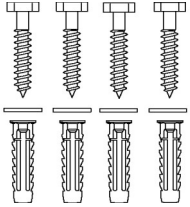
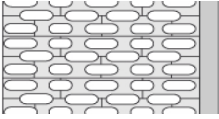
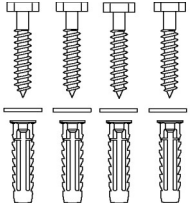
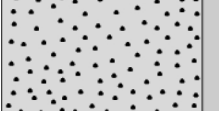
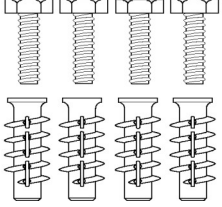
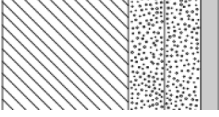
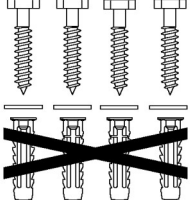
<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R4751
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr</li><li>- Maskindirektivet 2006/42/EØF</li><li>- RoHS-direktivet 2011/65/EU.</li></ul>





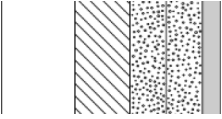
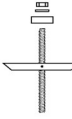

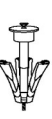
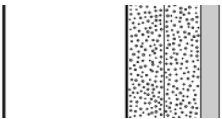
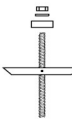


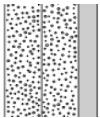
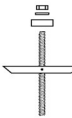


<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R4751

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart R4751	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®